



# MED.ONE

德康醫療器材事業有限公司



全面守護每台AED的守護專家

# AED.HOMES



## 智慧巡查 + 即時報表 讓您的AED從不缺席



## 24小時智能監控 / 即時推播



### AED智能管理模組

24小時即時推播：APP、EMAIL、  
24小時人員守機。

- 智能管理即時通知：  
AED機箱門：開啟/關閉  
醫療櫃：開啟/關閉  
AED主機：拿取/歸位  
機箱電源：斷電/復電  
警報聲音：開啟/關閉、暫時關閉  
AED主機：功能異常通知

- 報表：  
每日四次主動巡查記錄  
即時手機APP觀看。(APP報表)  
WEB網頁式記錄(網頁報表)

- 巡查項目：  
機箱門  
AED主機位置  
市電狀態  
AED主機功能  
環境溫度

- 異常通知、記錄：  
即時APP推播同時記錄發生時間



# MED.ONE

德康醫療器材事業有限公司

# AED收納箱 智慧偵測


內外兼修，讓安全與設計完美融合

ZOLL AED Plus® 電擊器將提供即時反饋與引導，“全程”指導您完成高品質心肺復甦，並在必要時為心臟釋放關鍵的電擊。



## 警報器

多種警報聲音可切換。

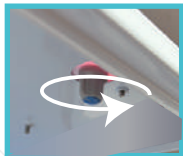

可調節聲音大小  
可調節開、關

- 隱藏式把手
- 烤漆鐵板材質
- 粉體錘紋烤漆 (ROHS無毒證明)



- √ 中文語音提示
- √ 文字提示
- √ 圖示步驟閃燈



成人電擊貼片

- 一體式貼片，輕鬆簡易操作
- 清楚標示心臟按壓正確位置提供明確指引
- 預先連接AED主機，無需額外操作，爭取黃金時間



兒童專用貼片  
適當的電擊電量大小 (50J-70J)

## 內部防水條

採一體成型發泡式  
增加密合度

## 醫療櫃

貼心分層  
可收納急救配件

## 指示牌



選配AED指示配件  
(有三種造型可選)

機箱左右側亦有AED指示  
清楚好辨認

使用9V/110V~220V 電源

警報器

AED  
主機功能

機箱門

AED  
主機位置

環境溫度

市電狀態



急救流程  
First Aid procedure

